

Female External Catheter

Designed to gently conform to the body.

Indications for Use

The Surity™ Female External Catheter is intended for non-invasive management of urinary incontinence in adults with female anatomy.


Contraindications: Users with urinary retention.

SYMBOL	SYMBOL TITLE	EXPLANATORY TEXT
	Manufacturer	Indicates the medical device manufacturer
	Lot number	Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified
	Reference number	Indicates the manufacturer's reference number so that the medical device can be identified
	Medical device	Indicates that this product is a medical device
	Single use	Indicates a medical device that is intended for one single use only
	Do not use if damaged or opened	Indicates that the product should not be used if the package has been damaged or opened
	Use by	Indicates the date after which the medical device is not to be used
	Consult Instructions for Use	Indicates the need for the user to consult the instructions for use


Warnings and Precautions

- The Surity™ Female External Catheter is designed for single-use only. Do not wash or reuse the external catheter. Reuse may result in problems such as skin irritation or infection, malfunction, or product damage.
- Never push or rub the external catheter against the skin during placement or removal to avoid potential skin injury.
- Do not insert the external catheter into the vagina, anus, or other body openings.
- Do not use the external catheter if there is skin irritation or breakdown in the area around the labia or urethra.
- Do not use the external catheter if there are open skin lesions, severe ulceration, or severe rashes in the genital area.
- Do not use during moderate to heavy menstruation if internal menstrual products (e.g., tampons or menstrual cups) cannot be used.
- Do not use if the user has frequent episodes of fecal incontinence.
- Do not use if the user has had recent surgery on the external female anatomy.
- If an allergic reaction occurs, stop use immediately and contact your doctor.

Female Anatomy

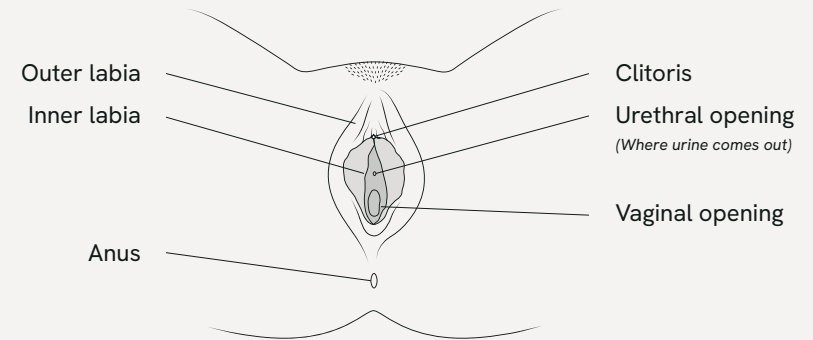

Female External Catheter

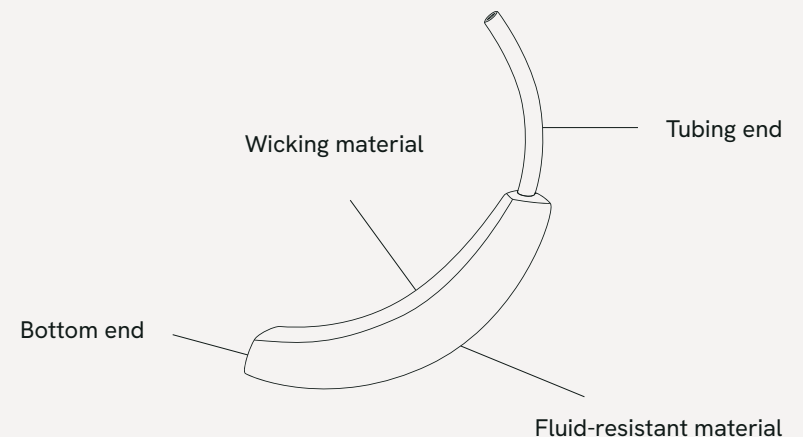

Instructions for Use

How to Prepare

- Wash your hands before and after placing or removing the Surity™ Female External Catheter.
- Wear gloves if you're placing or removing this product for someone else.
- Clean the genital area and check the skin condition for rashes and skin breakdown prior to placement.
- Do not use if the user has visible signs of skin irritation or breakdown in the genital area or at the application site.

Urine Collection System Setup

1. Assemble your at-home urine collection system according to its manufacturer instructions.
2. Securely connect the Surity™ Female External Catheter tubing to the collection system tubing, ensuring a snug and leak-free connection. (Fig. A)
3. Turn on the urine collection system by pressing the power switch.

External Catheter Placement

4. Make sure the user is lying on their back or in a reclined position with legs separated.
5. Gently spread the inner labia to expose the urethral opening. Clean the genital area thoroughly from front to back. (Fig. B)
6. Hold the external catheter with the tubing oriented toward the navel (belly button).
7. **Inner labia placement (Recommended):**
Gently tuck the external catheter between the inner labia, placing it directly against the urethra. Make sure the inner labia remain spread and are not tucked underneath the external catheter. (Fig. C)

Outer labia placement (Alternative):

Gently place the catheter on the outside of the outer labia, positioning it against the urethral opening without tucking it into the inner labia—similar to placing a pad.

8. Tuck the bottom end of the external catheter between separated buttocks. (Fig. D)
9. If applicable, gently position underwear or protective briefs over the external catheter.
10. Allow the legs to return to a natural, closed position while ensuring the external catheter stays in place.







External Catheter Removal

11. Separate the legs and gently spread the labia.
12. With the suction still on, gently pull the external catheter away from the body—being careful not to drag it against the skin. (Fig. E)
13. Disconnect the external catheter from the urine collection system tubing. (Fig. F)
14. Dispose of the used external catheter in accordance with local, state, and federal waste disposal guidelines.
15. Turn off the urine collection system by pressing the power switch.

Maintenance and Replacement

- Replace the external catheter at least every 8-12 hours, or immediately if contaminated with feces or blood.
- Always check the skin condition and clean the genital area before placing a new external catheter.
- Store the products in room temperature, 60-77°F.
- If any serious incident arises from the use of this product, contact the manufacturer and national competent authority.

☎ 1-877-456-3742 (Toll-free) ✉ USinfo@wellspect.com

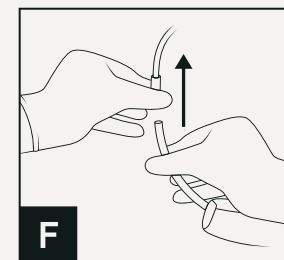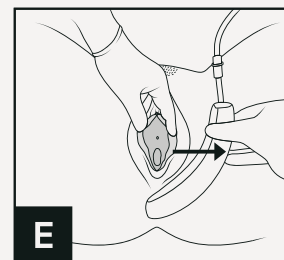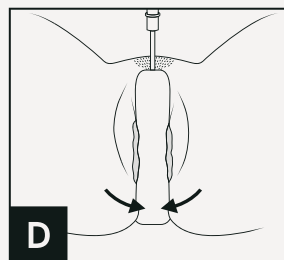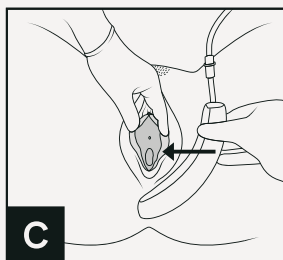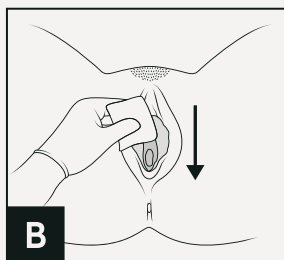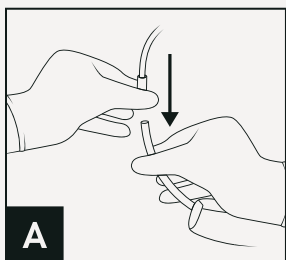

Catéter Externo Femenino

Diseñado para adaptarse suavemente al cuerpo y absorber la humedad.

Indicaciones de uso

El catéter externo femenino Surity™ está diseñado para el tratamiento no invasivo de la incontinencia urinaria en adultos con anatomía femenina.


Contraindicaciones: Usuaris con retención urinaria.

SÍMBOLO	LEYENDA DEL SÍMBOLO	TEXTO EXPLICATIVO
	Fabricante	Indica el fabricante del producto sanitario
	Número de lote	Indica el código de lote del fabricante para poder identificarlo
	Número de referencia	Indica el número de referencia del fabricante para poder identificar el producto sanitario
	Producto sanitario	Indica que este producto es un producto sanitario
	Un solo uso	Indica un producto sanitario que está destinado a un solo uso
	No utilizar si está dañado o abierto	Indica que el producto no se debe utilizar si el envase se ha dañado o abierto
	Fecha de caducidad	Indica la fecha a partir de la cual no se debe utilizar el producto sanitario
	Consultar instrucciones de uso	Indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso


Advertencias y precauciones

- El catéter externo femenino Surity™ está diseñado para un solo uso. No lave ni reutilice el catéter externo. La reutilización puede ocasionar problemas como irritación o infección de la piel, mal funcionamiento o daños en el producto.
- No empuje ni frote nunca el catéter externo contra la piel durante su colocación o retirada para evitar posibles lesiones cutáneas.
- No inserte el catéter externo en la vagina, el ano u otras aberturas del cuerpo.
- No utilice el catéter externo si hay irritación de la piel o escarificación en la zona alrededor de los labios o la uretra.
- No utilice el catéter externo si hay lesiones cutáneas abiertas, ulceración grave o erupciones graves en la zona genital.
- No utilizar durante menstruaciones de moderadas a abundantes si no se pueden utilizar productos menstruales internos (por ejemplo, tampones o copas menstruales).
- No utilizar si la usuaria tiene episodios frecuentes de incontinencia fecal.
- No utilizar si la usuaria ha tenido una cirugía reciente en la anatomía externa femenina.
- Si se produce una reacción alérgica, interrumpa su uso inmediatamente y póngase en contacto con su médico.

Anatomía femenina

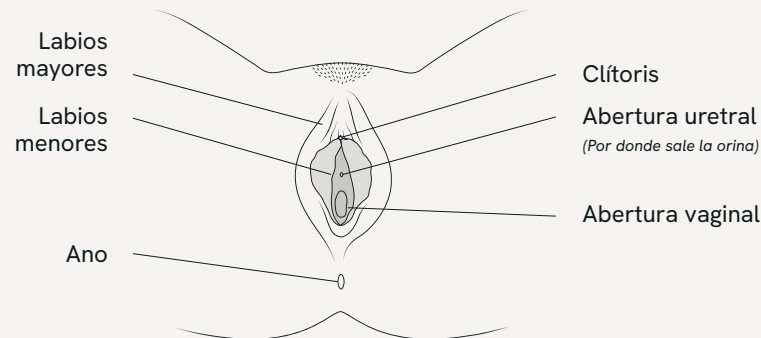

Catéter Externo Femenino

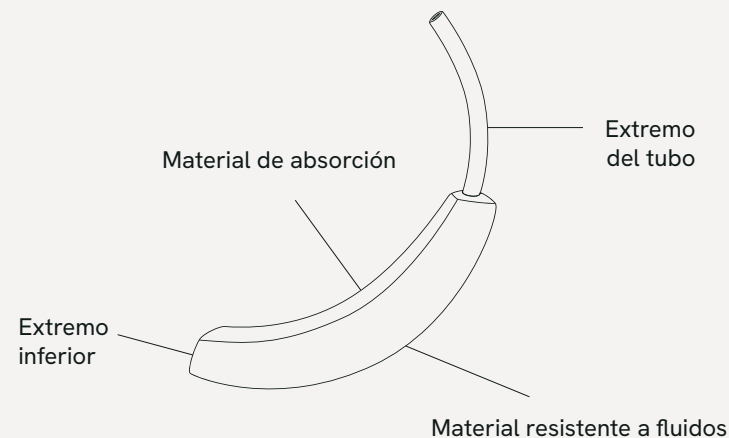

Instrucciones de uso

Preparación

- Lávese las manos antes y después de colocar o retirar el catéter externo femenino Surity™.
- Use guantes si va a colocar o retirar este producto de otra persona.
- Limpie la zona genital y compruebe el estado de la piel para detectar erupciones y escarificación cutánea antes de la colocación.
- No usar si la usuaria presenta signos visibles de irritación de la piel o escarificación en la zona genital o de aplicación.

Configuración del sistema de recogida de orina

1. Ensamble el sistema de recogida de orina en casa siguiendo las instrucciones del fabricante.
2. Conecte firmemente el tubo del catéter externo femenino Surity™ al tubo del sistema de recogida, garantizando una conexión ajustada y sin fugas. (Fig. A)
3. Encienda el sistema de recogida de orina pulsando el interruptor de encendido.

Colocación de catéter externo

4. Asegúrese de que la usuaria esté tumbada boca arriba o en posición reclinada con las piernas separadas.
5. Separe suavemente los labios menores para exponer la abertura uretral. Limpie bien la zona genital de adelante hacia atrás. (Fig. B) to back. (Fig. B)
6. Sostenga el catéter externo con el tubo orientado hacia el ombligo.
7. **Colocación en los labios menores (recomendado):** Introduzca suavemente el catéter externo entre los labios internos, colocándolo directamente frente a la uretra. Asegúrese de que los labios menores permanecen separados y no están metidos debajo del catéter externo. (Fig. C)

Colocación en los labios mayores (opcional):

Coloque suavemente el catéter en la parte exterior de los labios mayores, posicionándolo frente al orificio uretral sin meterlo en los labios menores, de forma similar a la colocación de una toalla sanitaria o compresa.

8. Meta el extremo inferior del catéter externo entre las nalgas separadas. (Fig. D)
9. Si procede, coloque suavemente la ropa interior o las prendas protectoras sobre el catéter externo.
10. Deje que las piernas vuelvan a una posición natural y cerrada mientras se asegura de que el catéter externo permanece en su sitio.

Extracción de un catéter externo

11. Separe las piernas y extienda suavemente los labios.
12. Con la succión aún activada, tire suavemente del catéter externo alejándolo del cuerpo, con cuidado de no arrastrarlo contra la piel. (Fig. E)
13. Desconecte el catéter externo del tubo del sistema de recogida de orina. (Fig. F)
14. Deseche el catéter externo usado de acuerdo con las pautas de eliminación de residuos locales, estatales y federales.
15. Apague el sistema de recogida de orina pulsando el interruptor de encendido.

Mantenimiento y sustitución

- Sustituya el catéter externo al menos cada 8 a 12 horas o inmediatamente si se contamina con heces o sangre.
- Compruebe siempre el estado de la piel y limpie la zona genital antes de colocar un catéter externo nuevo.
- Almacene los productos a temperatura ambiente, entre 60° y 77°F.
- Si surge algún incidente grave por el uso de este producto, póngase en contacto con el fabricante y la autoridad nacional competente.

☎ 1-877-456-3742 (gratuito)

✉ USinfo@wellspect.com

